


waterpik®

# Waterpik® UltraDental Water Jet

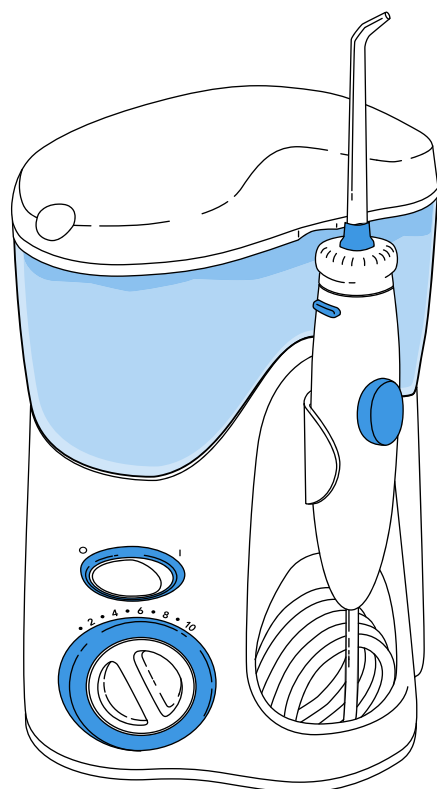

**Waterpik® Ultra  
Munddusche**

**Hydropulseur  
Waterpik® Ultra**

**Waterpik®  
ultradentale  
waterjet**

**Idropulsore  
dentale  
Waterpik® Ultra**

**Irrigador bucal  
Waterpik® Ultra**

.....  
[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

### Traditionele mondverzorging


Gefeliciteerd! Met uw keuze voor de Waterpik® ultradentale waterjet bent u op de goede weg naar een betere gezondheid van uw tandvlees en een gezondere glimlach.

Met een klinisch aangetoonde werkzame combinatie van waterdruk en pulsen verwijdert de Waterpik ultradentale waterjet schadelijke bacteriën diep tussen de tanden en onder de rand van het tandvlees, waar de tandenborstel niet goed bij kan komen.

Wij willen u bedanken dat u de Waterpik® ultradentale waterjet gekozen hebt.




U kunt met een tandenborstel verborgen voedselresten en schadelijke bacteriën niet bereiken.

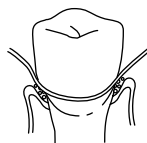

Met tandzijde kunt u maar gedeeltelijk onder de rand van het tandvlees komen.

### Mondverzorging met de Waterpik® dentale waterjet

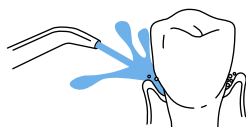

De Waterpik® dentale waterjet verwijdert vastzittende voedselresten en schadelijke bacteriën.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen	46
Productbeschrijving	48
Aan de slag	50
Onderhoud van uw Waterpik® dentale waterjet	55
Probleemoplossingsgids	56
Beperkte garantie van 2 jaar	57

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij gebruik van elektrische producten, dienen standaardveiligheidsmaatregelen altijd in acht genomen te worden, vooral in de buurt van kinderen.

### VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES LEZEN.

### GEVAAR: Om het gevaar van elektrocutie te verlagen, moet u:

- De stekker van het product na gebruik altijd uit het stopcontact halen.
- De stekker niet met natte handen aanpakken.
- Het product niet plaatsen of opslaan waar het in het bad, de douche of de wasbak kan vallen of getrokken kan worden.
- Het product niet gebruiken tijdens het baden.
- Het product niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Het product niet vastpakken als het in een vloeistof gevallen is, maar onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
- Het netsnoer voor het eerste gebruik en daarna regelmatig controleren op beschadigingen.

### WAARSCHUWING:


**Neem de volgende aanwijzingen in acht om mogelijke brandwonden, elektrische schok, brand, ernstig letsel of weefselbeschadiging te voorkomen.**


- Gebruik dit product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed functioneert, als het gevallen of beschadigd is of in een vloeistof is gevallen. U dient het product in dat geval naar een geautoriseerd servicecentrum of naar Waterpik Technologies terug te sturen.
- Geef kinderen en personen met speciale zorgbehoeften instructies over het juiste gebruik van dit product en zie toe op de naleving ervan.
- Richt de waterstraal niet onder de tong, in de oren, de neus of andere gevoelige plaatsen. Dit product kan genoeg druk produceren om deze plaatsen ernstig te beschadigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het juiste gebruik.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze instructies wordt aangegeven of volgens de aanbevelingen van uw tandarts.
- Dit product over een periode van 2 uur niet langer dan 5 minuten gebruiken.

- Gebruik uitsluitend hulpstukken, zoals jettips, Pik Pocket®-tips, tongreinigers en de orthodontische hulpstukken van Waterpik® die door Waterpik Technologies worden aanbevolen.
- Haal de Pik Pocket® flexibele tip niet uit de doorzichtige steel. Als de tip loslaat, dient u de tip en de steel weg te gooien en te vervangen door een nieuwe Pik Pocket®-tip.
- Vul het reservoir uitsluitend met water of andere aanbevolen oplossingen.
- Steek en laat geen vreemde voorwerpen vallen in een van de openingen of de slang.
- Houd het elektriciteitsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van zuurstof of aërosols.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Het product niet gebruiken als u een mondsieraad draagt. U dient dit voor gebruik te verwijderen.
- Het product niet gebruiken als u een open wond aan uw tong heeft.
- Als uw arts of cardioloog u heeft aangeraden antibiotica te gebruiken voor u een tandheelkundige behandeling ondergaat, dient u uw tandarts te raadplegen voor u dit instrument of een ander mondhygiënisch hulpmiddel gaat gebruiken.


**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## PRODUCTBESCHRIJVING



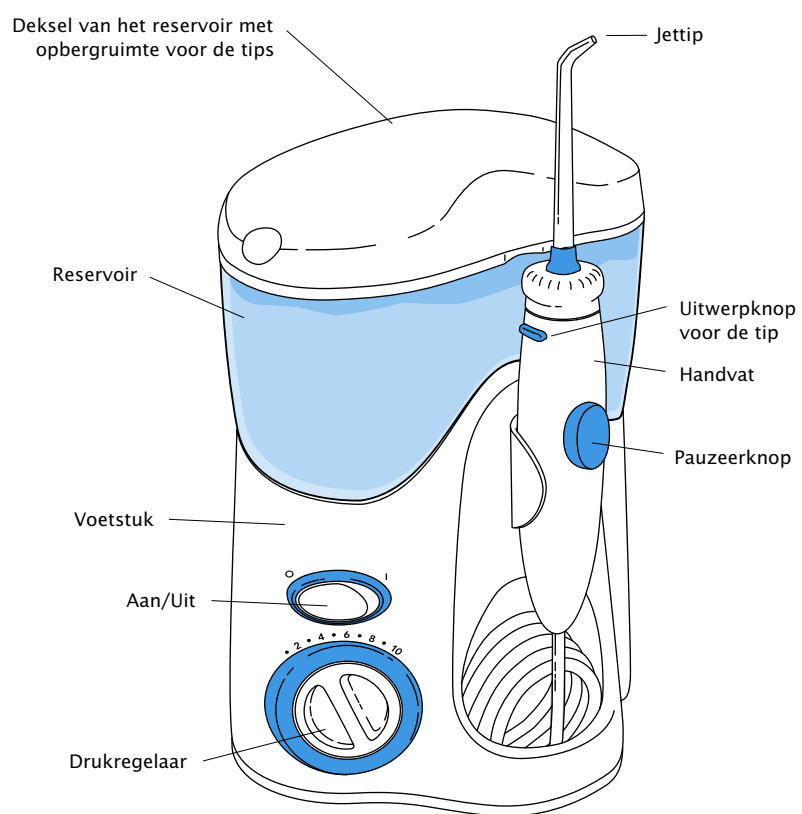


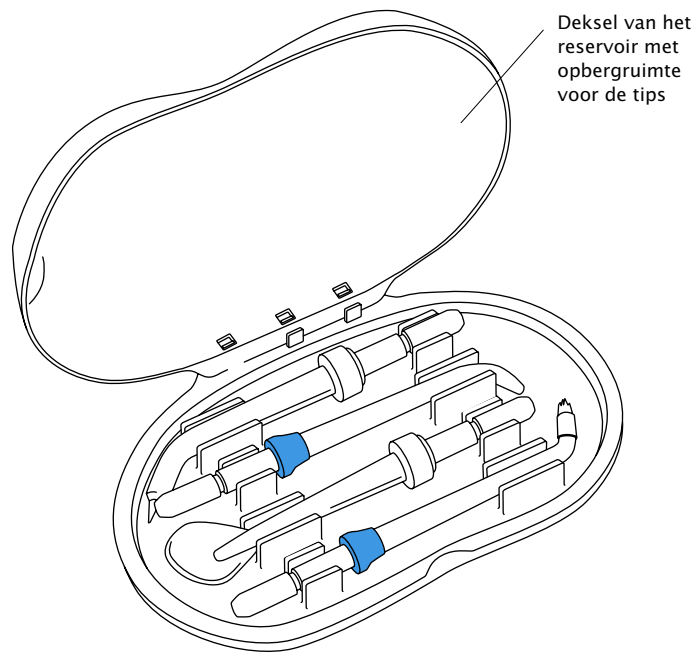

NEDERLANDS

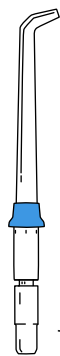

Jettip

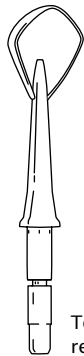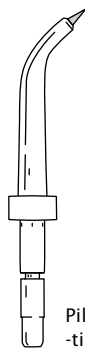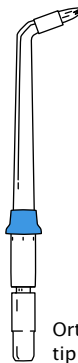
Tong-  
reinigingstipPik Pocket®  
-tipOrthodontische  
tip

## AAN DE SLAG

Steek de stekker in een stopcontact. Als het stopcontact met een schakelaar in- en uitgeschakeld wordt, dient u ervoor te zorgen dat het ingeschakeld is.


### Het reservoir klaarmaken

Verwijder het reservoir met deksel van het voetstuk. Vul het reservoir met lauw water. Zet het reservoir weer op het voetstuk en druk het stevig aan.

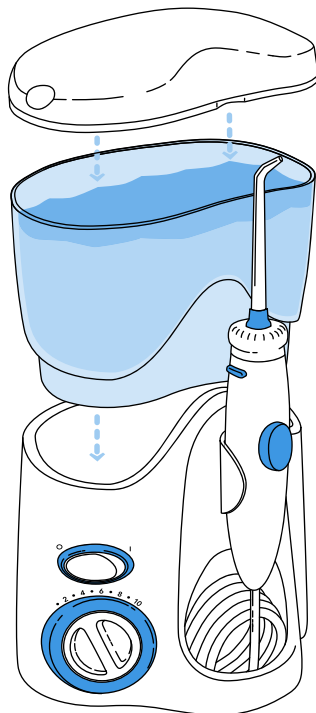


### Tips bevestigen en verwijderen

Steek een tip in het midden van de kop bovenaan het handvat van de dentale waterjet. Als de tip op de juiste manier vergrendeld is, zit de gekleurde ring tegen het eind van de kop aan. Door op de uitwerpknop voor de tip te drukken, kunt u de tip uit het handvat verwijderen.

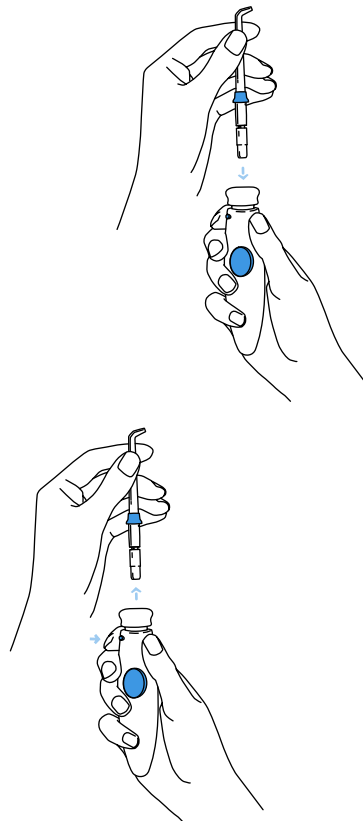

### De drukinstelling aanpassen



Draai de drukregelaar op het voetstuk van het apparaat voor het eerste gebruik naar de laagste stand (stand 1). Voer de druk geleidelijk over een aantal dagen op naar de stand die u verkiest of de stand die uw tandarts adviseert.

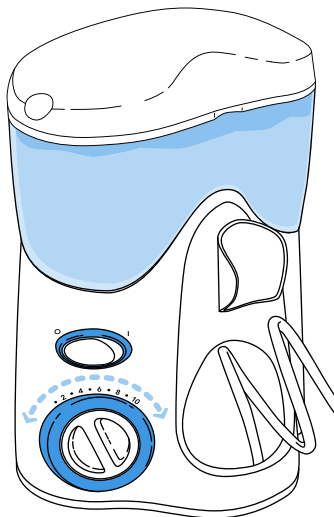

### Plaatsing in de mond

Buig over de wasbak en plaats de jettip in uw mond. Richt de tip op uw tanden.

Schakel het apparaat met uw vrije hand aan. Stel de druk in op de gewenste stand.



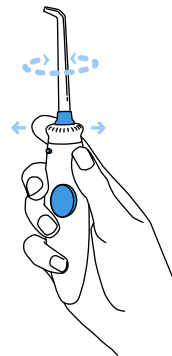
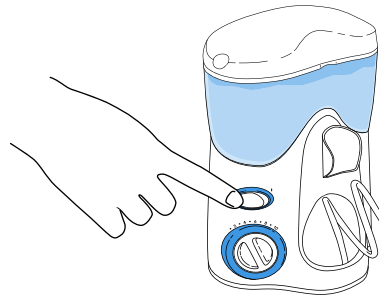


Richt de straal door de kop bovenaan het handvat te draaien.

## AAN DE SLAG

### Aanbevolen techniek

Richt de jetstraal onder een hoek van 90 graden op de rand van uw tandvlees. Sluit uw lippen om spetteren te voorkomen, maar laat het water vrijelijk van uw mond in de wasbak stromen. Voor de beste resultaten, begint u bij de kiezen (achter in de mond) en werkt u in de richting van de voortanden. Schuif de jettip langs de rand van het tandvlees en stop telkens even tussen de tanden. Ga door tot alle gebieden rond en tussen de tanden gereinigd zijn.

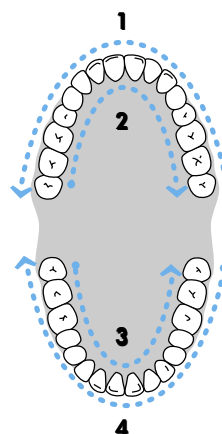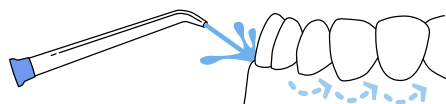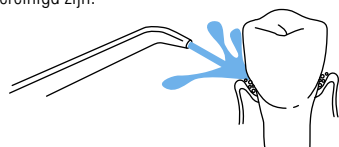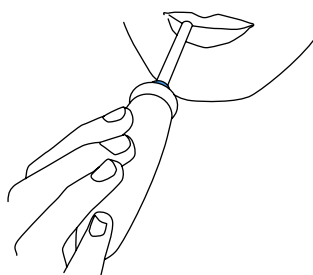


### Pauzeerknop

U kunt op elk gewenst moment de vloeistofstraal tijdelijk stoppen door de pauzeerknop op het irrigatorhandvat in te drukken.

### Als u klaar bent

Schakel het apparaat uit. Leeg de rest van de vloeistof uit het reservoir. Haal de stekker uit het stopcontact.

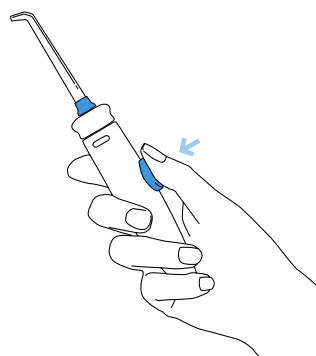


## SPECIALE TIPS

### Pik Pocket®-tip


De Pik Pocket®-tip brengt water of antibacteriële oplossingen diep op specifieke plaatsen onder de rand van het tandvlees.

Om de PikPocket®-tip te gebruiken, buigt u zich diep over uw wasbak en plaatst u de zachte tip onder een hoek van 45° tegen een tand en houdt u de tip onder de rand van het tandvlees en in de pocket. Schakel het apparaat in op de laagste drukinstelling en begin te reinigen, waarbij u de rand van het tandvlees zachtjes volgt en de tip tussen de tanden plaatst. Ga door met het volgen van de tandvleesrand tot het reservoir leeg is.

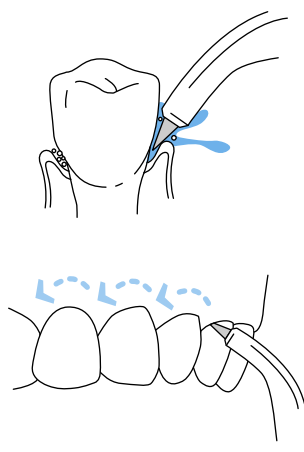

### Tip om de tong te reinigen


Buig over de wasbak. Plaats de tongreiniger op uw tong en schakel de dentale waterjet in. Begin met de laagste drukstand en verhoog de druk tot een aangename stand. Plaats de Waterpik®-tongreiniger voorzichtig in het midden van uw tong, ongeveer halverwege naar achteren en trek de reiniger met lichte druk naar voren.

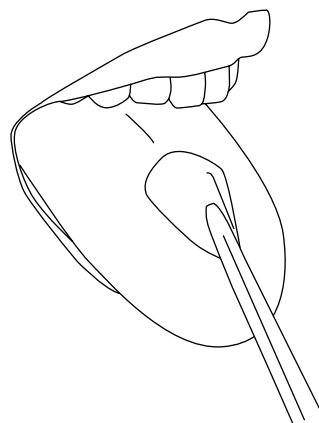

**Orthodontische tip**

De speciale orthodontische tip heeft een uniek ontwerp en kan moeilijk te bereiken plaatsen rond beugels en andere tandheelkundige voorzieningen tegelijkertijd borstelen en irrigeren.

Om de orthodontische tip te gebruiken, buigt u zich diep over uw wasbak en gebruikt u het borsteltjes om rond tandheelkundige voorzieningen te borstelen. Het water dat door de borstel stroomt, spoelt eventuele voedselresten, die u verwijderd hebt, weg.

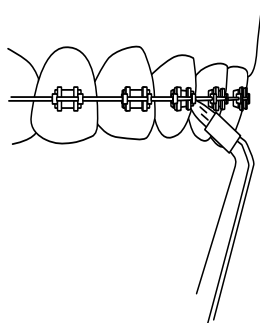**Het gebruik van mondspoelingen en andere oplossingen**

Uw Waterpik® dentale waterjet kan gebruikt worden met mondspoelingen en andere antibacteriële oplossingen. Vraag uw tandarts welk middel hij of zij voor u zou aanbevelen. Let op: het gebruik van bepaalde antibacteriële oplossingen kan de levensduur van uw Waterpik® dentale waterjet verkorten. Als u vragen hebt over het gebruik van een bepaald middel in uw dentale waterjet, kunt u contact opnemen met de klantendienst van Waterpik. Na elk gebruik van een speciale oplossing in het reservoir, dient u het apparaat zorgvuldig uit te spoelen. Vul het reservoir gedeeltelijk met warm water uit de kraan. Richt de jettip in de wasbak. Schakel het apparaat aan en laat het helemaal leeglopen. Hierdoor worden alle sporen van het middel verwijderd, voorkomt u dat de tip verstopt raakt en gaat uw apparaat langer mee.

**ONDERHOUD VAN UW WATERPIK® DENTALE WATERJET**

Reinig het product zo nodig met een zachte doek en een mild niet-schurend reinigingsmiddel.

Haal voor de reiniging de stekker uit het stopcontact.

Voor u de dentale waterjet aan temperaturen onder het vriespunt blootstelt, dient u het reservoir te verwijderen en het apparaat te laten lopen tot het helemaal leeg is.

**Reparatie en onderhoud**

Waterpik® dentale waterjets bevatten geen elektrische onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden; het apparaat heeft geen regelmatig onderhoud nodig. Reparatie van dit product mag uitsluitend verricht worden door geautoriseerde servicecentra of door Waterpik Technologies. Ga voor al uw onderhoudsbehoeften naar [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com) en klik op service locator voor het dichtstbijzijnde servicecentrum. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke leverancier van Waterpik® voor product- en onderhoudsinformatie. Vermeld in alle correspondentie het serienummer en modelnummer. U kunt deze nummers vinden op de onderkant van uw apparaat.

Global Agency B.V.  
Energiestraat 14E  
1411 AT Naarden  
The Netherlands  
Phone: +31 35 69 51 443  
Fax: +31 35 69 20 465

PROBLEEM:	OORZAAK	CORRIGERENDE MAATREGEL
<b>Jettips en tongreiniger</b> Lekken tussen de tip en de kop van het handvat.	Tip zit niet helemaal in het handvat.	Verwijder de tip en zet deze opnieuw in het handvat.
<b>Pik Pocket®-tip</b> Scheur in zachte tip.	Tip is versleten.	Door nieuwe tip vervangen.
<b>Voetstuk van de irrigator</b> Slang naar het handvat lekt.	Slang is beschadigd.	Kan vervangen worden door geautoriseerd servicecentrum of neem contact op met de klantendienst van Waterpik voor een doe-het-zelf reparatiekit.
Reservoir lekt.	Reservoirklep ontbreekt of de reservoirklep zit ondersteboven.	Vervang de reservoirklep (bel de klantendienst van Waterpik Technologies). Draai de klep om.
Onvoldoende druk.	Reservoir is niet juist geplaatst.	Plaats het reservoir opnieuw. Druk het reservoir stevig aan.
Apparaat begint niet te lopen.	Motor loopt niet.	Zorg dat het stopcontact functioneert; test met een ander apparaat (controleer de elektrische reset-knop en/of de wandschakelaar).

## BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Waterpik Technologies garandeert de oorspronkelijke koper/eigenaar van dit product dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw kassabon als bewijs van de datum van aankoop. We zullen een onderdeel van het product repareren of vervangen, als het naar onze mening defect is, mits het product na aankoop niet misbruikt, oneigenlijk gebruikt, veranderd of beschadigd is en gebruikt is volgens deze instructies. De standaard jettips, PikPocket<sup>®</sup>-tips, orthodontische tips en de hulpstukken van de tongreiniger vallen niet onder deze beperkte garantie.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u heeft wellicht nog andere rechten, die van land tot land kunnen verschillen.